



Be Filler[®]

Un nou filler pe bază de acid hialuronic
pentru tratamentul imperfecțiunilor faciale



Un nou filler pe bază de acid hialuronic pentru tratamentul imperfecțiunilor faciale

■ ACIDUL HIALURONIC

Acidul hialuronic este unul dintre componentele fundamentale ale țesutului conjunctiv la oameni și alte mamifere. Conferă pielii proprietatea de rezistență și capacitatea de a-și menține forma. Scăderea concentrației de acid hialuronic cauzează deteriorarea tegumentului, cu apariția consecutivă a ridurilor și imperfecțiunilor. Concentrația acidului hialuronic tinde să scadă odată cu vârsta din cauza prezenței unei enzime particulare, hialuronidază, care accelerează degradarea lanțurilor de acid hialuronic.

■ ACIDUL HIALURONIC RETICULAT

Acidul hialuronic (AH) este utilizat în medicina estetică pentru capacitatea sa de a lega un număr foarte mare de molecule de apă.

AH liniar, aplicat pe piele sau injectat (în cazul fillerelor), precum și cel natural prezent în tegument, este degradat în scurt timp de hialuronidază. Pentru a încetini acest proces fiziologic, AH este modificat chimic cu ajutorul agenților de reticulare. Structura devine reticulată, se transformă din liniară în tridimensională și se formează cuști moleculare foarte stabile și mai bine protejate la atacul hialuronidazei.

Cu cât este mai mare gradul de reticulare, cu atât mai lentă va fi degradarea acidului hialuronic.

■ ACIDUL HIALURONIC RETICULAT ÎN MEDICINA ESTETICĂ

Acidul hialuronic reticulat injectat permite umplerea spațiilor intradermice și integrarea matricei intercelulare, conferind soliditate țesuturilor într-o manieră stabilă și durabilă în timp.



An advertisement for BeFiller. The top half features a woman with long dark hair looking directly at the camera. A hand in a white glove is holding a syringe, injecting a substance into her cheek. Another hand in a white glove is gently touching her forehead. The background is a solid yellow color. A large, stylized 'B' is visible in the upper left corner. The bottom half of the advertisement is white with a curved border. It contains the website address 'www.befiller.com', the product name 'BeFiller' with a registered trademark symbol, and a description in Romanian: 'NOUL FILLER PE BAZĂ DE ACID HIALURONIC PENTRU TRATAMENTUL IMPERFECȚIUNILOR FACIALE'.

www.befiller.com

BeFiller[®]

NOUL FILLER
PE BAZĂ DE ACID HIALURONIC
PENTRU TRATAMENTUL
IMPERFECȚIUNILOR FACIALE

Un nou filler pe bază de acid hialuronic pentru tratamentul imperfecțiunilor faciale

■ BE FILLER

Acid hialuronic reticulat, ne-pirogenic, resorbabil, prezentat în seringă din sticlă pre-umplută, gradată și sterilă, cu adaptor Luer Lock.

■ TRATAMENTE

Be Filler se injectează în tegument cu scopul de a elimina sau de a reduce ridurile superficiale și profunde, pentru a mări volumul țesuturilor moi (buze, pomeți, obraji) pentru a accentua mai bine conturul facial sau în scopuri de reconstrucție (cicatrici profunde, cicatrici sechelare după acnee și varicelă), rinoplastia non-chirurgicală.

■ REZULTATE

Rezultatul este foarte natural și imediat vizibil, creând un efect imediat de „lifting” datorită proprietăților intrinseci viscoelastice și hidrofile ale acidului hialuronic, ceea ce permite recrearea volumelor dorite.

■ DURATĂ

Eficace, durabil și sigur. Resorbția intervine treptat între 6 și 8 luni, în funcție de tipul de Be Filler folosit.

Tratamentul poate fi repetat în siguranță, după ce efectele de umplere s-au diminuat.



Acidul hialuronic este utilizat în mod curent pentru tratamentul imperfecțiunilor feței. Prin reticulare se produce îngroșarea numeroaselor molecule liniare de acid hialuronic cu creșterea consecutivă a masei moleculare; structura devine tridimensională și crește rezistența la atacurile enzimactice, crescând astfel persistența în derm și țesutul subcutanat.

Procesul de reticulare, crucial pentru creșterea eficacității acidului hialuronic, poate avea loc într-o varietate de moduri și, prin urmare, cu rezultate diferite, în funcție de metoda utilizată pentru reticulare.

BeFiller beneficiază de un proces exclusiv de producție și purificare, ESTERI FYL Technology, astfel încât se evită orice risc posibil de reziduuri libere ale moleculei reticulate, care ar putea interfera într-un fel cu comportamentul acesteia.

Toate aceste elemente produc extraordinare efecte pozitive asupra purității materialului de umplere, sporind în mod semnificativ performanța și siguranța acestuia, cu acoperirea eficientă a ridurilor și imperfecțiunilor pielii pentru o perioadă mai lungă de timp.

Be Filler fine



Be Filler medium



Be Filler plus



■ DE CE SĂ ALEGEȚI BE FILLER:

- Este foarte bine tolerat, pentru că este **înalt purificat** și practic lipsit de endotoxine și alte substanțe toxice libere
- Efectul este **vizibil imediat**, de la prima aplicare
- Are **lungă durabilitate** în țesuturi datorită modului inovativ de reticulare
- Are aplicare **simplă**, dar eficientă


- **MATERIA PRIMĂ ATENT SELECTATĂ:** Acidul hialuronic selectat este foarte stabil, produs prin metodologie de sinteză bazată pe biofermentația unei **tulpini microbiene de origine biotehnologică**, nepatogenă pentru oameni.

Nu se utilizează materii prime de origine animală, iar utilizarea solvenților organici a fost eliminată din toate etapele de producție.

- **PROCES INOVATIV DE PRODUCȚIE:** sistemul de producție dezvoltat pentru Be Filler garantează sterilitatea fillerului prin **preparare complet aseptică**, evitând astfel procesul de degradare termică, tipic sterilizării termice convenționale (care se realizează abia în finalul procesului de producție). Se garantează astfel **stabilitate mai mare** cu păstrarea caracteristicilor chimico-fizice ale substanței active și **durabilitate mai mare în timp** a efectului tratamentului.

- **GARANȚIA SIGURANȚEI:** Înalta purificare, concentrațiile foarte scăzute de acizi nucleici și proteine, rata de endotoxine bacteriene 0,5 EU / ml (mult sub limitele cerute de Farmacopeea Europeană pentru produsele injectabile) reduc la minim eventualele reacții de hipersensibilitate.

Agentul de reticulare utilizat reduce în mod suplimentar toxicitatea Be Filler, comparativ cu alte substanțe de umplere care utilizează alți agenți de reticulare.


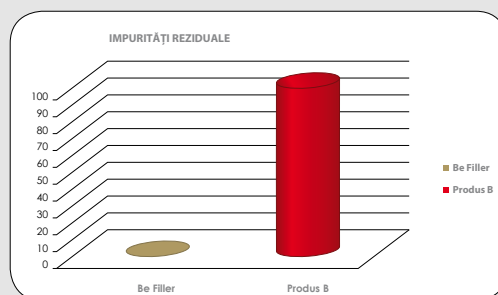


■ STUDII CLINICE

Rezultatele unui studiu clinic de urmărire realizat de 10 specialiști (dermatologi, chirurghi plasticieni și specialiști în medicina estetică) cu 95 de pacienți (femei, vârsta medie: 50 ani) timp de un an, confirmă eficacitatea excelentă a diferitelor tipuri de produse Be Filler.

Parametrii considerați au fost ameliorarea aspectului ridurilor faciale, creșterea hidratării pielii și durabilitatea în timp a efectelor tratamentului.

Sesiunile de tratament au fost spațiate la intervale de 3 săptămâni, iar evaluarea a evidențiat următoarele rezultate: după 2 luni și jumătate de tratament, s-a observat o ameliorare aspectului ridurilor de 83% și o creștere de 75% a hidratării pielii, așa cum este evidențiat în graficele alăturate.

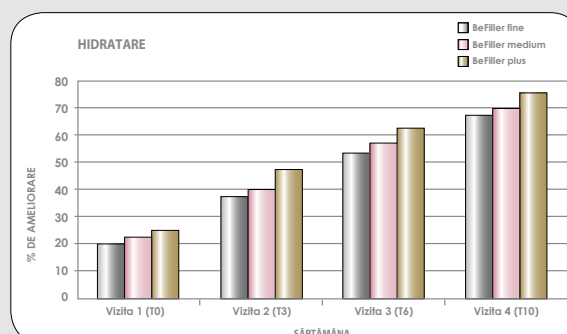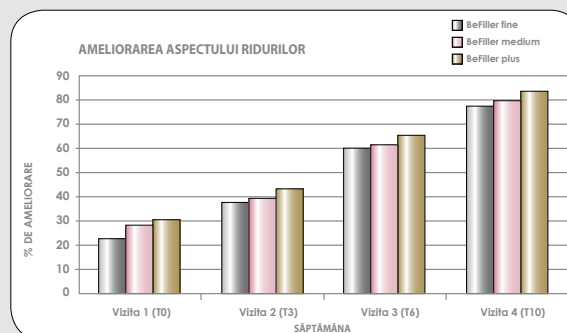

Be Filler®

3 CONCENTRAȚII

Be Filler®
fine



Ridurile fine de expresie

Be Filler®
medium



Ridurile de adâncime medie
Conturarea buzelor
Volumul buzelor

Be Filler®
plus



Ridurile profunde
Augmentarea volumului buzelor
Augmentarea volumului în
zona zigomatică
Remodelarea conturului facial

Concentrație	20 mg/ml	25 mg/ml	30 mg/ml
Zona de injectare	Derm mediu, submucoasa labială	Derm profund	Profund în hipoderm sau supraperiost
Durata	6/8 luni	6/8 luni	6/8 luni
pH	6.00 - 7.00	6.00 - 7.00	6.00 - 7.00
Masa moleculară	2.400.000- 4.000.000 Da	2.400.000- 4.000.000 Da	2.400.000- 4.000.000 Da
Endotoxină totală	0.5 EU/ml	0.5 EU/ml	0.5 EU/ml
Condiționare	1 seringă de 1ml	1 seringă de 1ml	1 seringă de 1ml
Ac	27G ½	27G ½	27G ½
Temperatura de păstrare	5 - 25 °C	5 - 25 °C	5 - 25 °C
Cod produs	BF1010	BF1020	BF1030



Într-o cutie **Be Filler** sunt prezente:

- 1 seringă din sticlă preumplută care conține produsul, gradată, de 1 ml, cu atașament Luer Lock + suport din plastic alb pentru a utiliza seringă cu o mai mare ușurință în manevrare.
- 2 ace sterile de unică folosință 27G 1/2 ".
- 1 card care va fi transmis pacientului la sfârșitul tratamentului.

Cardul trebuie să conțină informații utile: numele și prenumele pacientului, data efectuării tratamentului și data programată a controlului.

Blisterul conține 2 etichete autocolante de certificare: una va fi atașată la fișa medicală a pacientului, iar cealaltă va fi aplicată pe card pentru a certifica dispozitivul medical folosit.

- instrucțiuni de utilizare.



CE
0373

Frunte
Be Filler medium, plus

Punte nazală
Be Filler medium, plus

Șanțuri naso-labiale,
liniile surâsului
Be Filler medium, plus

Linii de marionetă
Be Filler medium, plus

Șanțuri lacrimale, zona palpebrală
Be Filler fine, medium

Liniile fine, regiunea temporală
Be Filler fine, medium

Zona superioară a obrazului
Be Filler fine, medium

Zona inferioară a obrazului
Be Filler fine, medium, plus

Ridicarea buzelor, augmentare
Be Filler medium, plus

Regiunea mandibulară,
maxilară, mentonieră
Be Filler medium, plus

Cazuri clinice

■ Cazul 1



ÎNAINTE



DUPĂ

■ Cazul 2



ÎNAINTE




DUPĂ

■ Cazul 3



ÎNAINTE

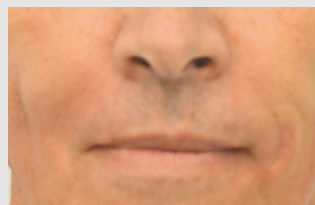

DUPĂ

■ INSTRUMENTE DE MARKETING



■ Roll Up

Cod. BF1050

■ Display cu pliante informative

Cod. BF1052



■ Corsuri Be Filler

Cursurile Be Filler oferă participanților cunoștințele necesare pentru a efectua cu succes și în condiții de siguranță, tratamente estetice faciale cu substanțe de umplere resorbabile, pe zonele anatomice aflate în competența lor.

Cursurile sunt concepute special pentru medicii dentiști și se compun dintr-o primă parte teoretică, urmată de sesiune practică.

Pentru mai multe informații, vizitați zona special destinată cursurilor pe website-ul www.befiller.com




Diplome de participare la cursuri

■ Be Filler Video Training

Be Filler a creat un program exclusiv de Video Training, ce pune la dispoziție o colecție de filme dedicate situațiilor specifice, cu ilustrarea celor mai bune tehnici de injectare intradermică.

Videoclipurile conțin ilustrații detaliate ale anatomiei faciale și dezvoltă cu claritate modalitățile specifice de intervenție și tratament.

Pentru mai multe informații, vizitați zona special destinată cursurilor pe website-ul www.befiller.com

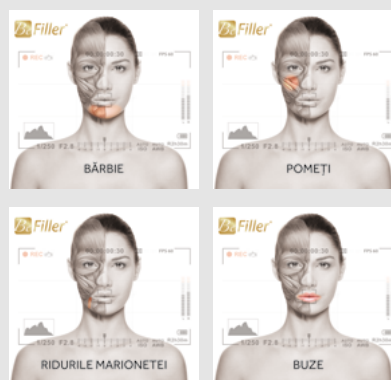

Câteva exemple din colecția de videoclipuri

www.BeFiller.com



Distribuit în România de: MIROMED-ROM GROUP S.R.L. - Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 87, sector 1, București
Tel/Fax: +40 371 37 99 76 - Email: info@miromed-ro.com - www.miromed-ro.com

MIROMED GROUP s.a. - Corso San Gottardo, 54A - 6830 Chiasso - CH
Tel. +41 (0) 91 960 58 48 - www.miromedgroup.ch